



OCUTEARS
OCUTEARS
OCUTEARS
OCUTEARS
OCUTEARS
OCUTEARS
OCUTEARS
OCUTEARS

Brugsanvisning

Øjendråber uden konserveringsmidler

Hvad er Ocutears® Hydro+, og hvad anvendes de til?

Ocutears® Hydro+ er fugtgivende øjendråber baseret på højkoncentreret tværbundet natriumhyaluronat (0,4 %) til lindring af tørre øjne, herunder svære tilfælde af okulært ubehag, og til beskyttelse af hornhinden.

Dette produkt er steril og indeholder ingen konserveringsmidler.

Tværbundet natriumhyaluronat giver produktet høj viskositet og elasticitet, så øjets overflade holdes fugtig i længere tid og modvirker varige gener på grund af tørre øjne, såsom ørnhed, brændende eller stikkende fornemmelse, oplevelsen af at "have noget i øjet", samt trætte eller løbende øjne.

Ocutears® Hydro+ er beregnet til at:

- Lindre ubehag og tørre øjne og tilføre kunstig tårevæske, der bevarer fugten og beskytter hornhinden.
- Fungerer som et fugtgivende middel ved brug af kontaktlinser.

Ocutears® Hydro+ er delagtig før og efter:

- langvarigt ophold i solen
- ophold i rum med aircondition
- langvarigt skærmarbejde
- kontakt med rengøringsmidler

Ocutears® Hydro+ kan også afhjælpe ubehag efter øjenoperation.

Sådan anvendes Ocutears® Hydro+

Dryp 1 eller 2 dråber i hvert øje en eller flere gange om dagen eller ifølge lægens eller apotekets anvisninger.

Vask hænderne, før du åbner beholderen, og oprethold god hygiejne under håndteringen.

Beholder:

1) Inden åbning skal du trække forseglingen af og fjerne den helt.	
2) Klem forsigtigt 1 dråbe ind i øjet.	
3) Luk beholderen helt efter brug.	

Engangsdosis:

1) Riv stripsen af en af minibeholdere, og kassér den.	
2) Åbn beholderen ved at dreje hætten.	
3) Klem forsigtigt 1 dråbe ind i øjet.	
4) Kassér den resterende mængde i minibeholderen på passende vis efter brug.	

Læs indlægssedlen omhyggeligt, inden du begynder at bruge dette produkt.

Gem denne indlægsseddelen, i tilfælde af at du får brug for at læse den igen.

Hvis du har yderligere spørgsmål, skal du spørge din læge eller dit apotek.

Hvis symptomerne fortsætter, eller du får bivirkninger, skal du kontakte din læge.

Advarsler:

- Anvend aldrig produktet, hvis du er allergisk eller følsom over for et eller flere af indholdsstofferne.
- Brug beholderen inden for 90 dage efter åbning. Enkeltdosisbeholderen skal anvendes straks efter åbning og bortslettes efter brug.
- Anvend aldrig produktet efter den udløbsdato, der er angivet på emballagen.
- Anvend aldrig produktet, hvis emballagen er beskadiget.
- Skal holdes væk fra sol, varme, fugt og uden for børns rækkevidde.
- Må ikke indtages.
- Sørg for, at spidsen på beholderen ikke berører øjet.
- Skal opbevares under 25°C. Må ikke nedfrysese.

Indholdsstoffer:

Tværbundet natriumhyaluronat 0,4 %, dinatriumtetaboratdecahydrat, borsyre, natriumchlorid, vand til injektionsvæsker.

Pakninger: 10 ml beholder (PFMD), 0,35 ml x 15 enkeltdoser, 0,35 ml x 5 enkeltdoser (prøve)

Du kan få yderligere oplysninger hos din læge eller det lokale Santen-kontor på www.santen.eu



 OFFHEALTH S.p.A.,
Via Giovanni Paisiello 10,
50144 Florence, Italy

Santen

Denne indlægsseddelen er senest ændret i december 2020

Produktions-dato	Producent	Opbevares under 25°C	Undgå direkte sollys	Steriliseret ved brug af aseptisk behandlings-teknik	Batch-nummer	Sidste anvendelses-dato	Læs vej-ledningen for brug	Må ikke genbruges	Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget	Opbevares tørt

Notkunarleiðbeiningar

Augndropar án rotvarnarefna

Upplýsingar um Ocutears® Hydro+ og við hverju það er notað

Ocutears® Hydro+ eru mykjandi augndropar sem byggjast á óblönduðu og þverbundnu natrium hyaluronati (0,4%). Þessi samsetning er hönnuð til bess að draga úr einkennum augnþurks, jafnvel í alvarlegum tilvikum, við óþægindum í auga og til að verja glæru augans.

Þessi vara eru dauhreinsuð og án rotvarnarefna.

Pverbundið natrium hyaluronat veitir vorunni seigfiaðrandi eiginleika og tryggir mikla vökvun og endingu á yfirborði augans. Þetta veitir langvinnan létti frá einkennum augnþurks, svo sem eyrslum, svíða, stingum, tilfinningu eins og sandur eða ryk sé í auga, þreytu, þunga eða óhóflegu tárarennslí.

Ocutears® Hydro+ er ætlað:

- til að draga úr einkennum augnþurks, við óþægindum í auga og einnig til að verja glæruna með því að koma í stað téra og veita langvarandi vökvun augans.
- til þess að nota sem gervítar, jafnvel þegar augnlinsur eru notaðar.

Ocutears® Hydro+ gagnast meðan á stendur og í kjólfar:

- langvarandi útsetningar fyrir sólarljósi,

- útsetningar fyrir loftkældum herbergjum,
- langvarandi skjánokun,

• að hafa komist í snertingu við hreinsiefni;

Ocutears® Hydro+ gæti einnig dregið úr óþægindum í auga eftir skurðaðgerð.

Hvernig nota á Ocutears® Hydro+

Settu 1 eða 2 dropa í hvort auga einu sinni eða oftart á eða eða samkvæmt ráðleggingum læknisins eða lyfjafræðingssins.

Þvoð hendumar áður en flátið er opnað og gættu hreinlætis við meðhöndlun.

Flaska:

1) Dragðu fyrst og fjarlægðu alveg bandið sem heldur innsglaða lokinu.	
2) Krestu varlega 1 dropa í augað.	
3) Lokaðu flöskunni vandlega eftir notkun.	

Stakskammtailát:

1) Taktu strimilinn af smáílátinu og losaðu eitt.		1
2) Opnaðu ílátið með því að snúa hettunni.		2
3) Kreistu varlega 1 dropa í augað.		3
4) Fargaðu afgangsefninu í smáílátinu eftir notkun.		

Varnaðarorð:

- Ekki vöruna ef þú ert með ofnæmi fyrir einhverju innihaldsefnum.
- Notaðu flöskuna innan 60 daga frá því að hún er opnuð; nota skal stakskammtailátíð strax eftir opnun og farga því eftir notkun.
- Ekki nota vöruna eftir fyrningardagsetninguna sem tilgreind er á pakkingunni.
- Ekki nota lyfið ef pakkingin er skemmd.
- Geymið vörurna fjarri hita, sólarljósi, raka og þar sem börn nái ekki til.
- Ekki innbyrða efnioð.
- Gætið þess að oddur hylkisins komist ekki í snertingu við augað;
- Geymið við lægri hita en 25°C. Má ekki frjósá.

Innihaldslýsing:

Pverbundið natriumhyaluronat 0,4%, tvínatrium tetraborat tihýdrat, bórsýra, natriumklóríð, vatn til innældingar.

Lestu allan fylgiseðilinn vandlega áður en þú byrjar að nota þessa vörum.

Geymdu þennan fylgiseðil; þú gætir burft að lesa hann aftur.

Leitið til læknis eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Láttu lækninn vita um allar aukaverkanir eða ef það dregur ekki úr einkennum.



Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður desember 2020

Framleiðslu-dagsetning	Framleiðandi	Geymið við lægri hita en 25°C	Geymið fjarri sólarljósi	Sæft að viðhafði smitgát	LOT	Lotu-nummer	Síðasti notkunardagur	Sjá notkunar-leiðbeiningar	Ekkí nota aftur	Ekkí nota ef pakkingin er skemmd	Haltu burru

Bruksanvisning

Oftalmisk løsning uten konserveringsmidler

Hva er Ocutears® Hydro+, og hva brukes den til?

Ocutears® Hydro+ er en smørende oftalmisk løsning, basert på høykonsentrert krysslinket natriumhyaluronat (0,4 %) og formulert for lindring av symptomer ved torre øyne – inkludert alvorlige tilfeller, ubehag i øynene og beskyttelse av hornhinnen. Dette produktet er steril og uten konserveringsmidler. Krysslinket natriumhyaluronat gir produktet en høy viskoelastisitet som sikrer høy grad av hydrering og at produktet kan ligge lenge på øyetts overflate, noe som gir langvarig lindring fra symptomer på torre øyne, som f.eks. sårhet, brennende følelse, stikkende, sandaktig eller ru følelse, trette, tunge eller rennende øyne.

Ocutears® Hydro+ er indisert:

- for lindring av symptomer på tørre øyne, ubehag i øynene, samt for beskyttelse av hornhinnen som tåreerstatning med langvarig hydrering.
- Kan administreres for smøring av øyet også ved bruk av kontaktlinser.

Ocutears® Hydro+ er nyttigfør og etter:

- langvarig eksponering for sollys;
- eksponering for rom med air condition;
- langvarig skjermbruk;
- kontakt med rensemidler;

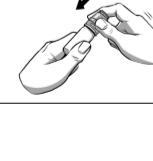
Ocutears® Hydro+ kan også gi lindring av ubehag etter øyeoperasjoner.

Hvordan du bruker Ocutears® Hydro+

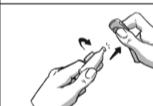
Drypp 1 eller 2 dråper i hvert øye én eller flere ganger om dagen eller slik lege eller apotek har fortalt deg.

Vask hendene før du åpner beholderen og vær nøyne med hygienen under håndteringen.

Flaske:

1) Før første åpning må du dra i sikkerhetsringen og fjerne den helt.		1
2) Klem forsiktig ut 1 dråpe på øyet.		2
3) Lukk flasken godt etter bruk.		3

Endose:

1) Ta ut én beholder fra stripens med minibeholdere.		1
2) Åpne beholderen ved å skru av korken.		2
3) Klem forsiktig ut 1 dråpe på øyet.		3
4) Etter bruk, kast innholdet som er igjen i minibeholderen på riktig måte.		

Les hele pakningsvedlegget nøyde før du begynner å bruke dette produktet.

Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

Spør lege eller apotek dersom du har flere spørsmål. Hvis symptomene vedvarer eller du opplever bivirkninger, kontakt lege.

Advarsler:

- Ikke bruk produktet hvis du er allergisk eller overfølsom overfor noen av innholdsstoffene;
- Bruk flasken innen 90 dager etter åpning; endosebeholderen skal brukes umiddelbart etter åpning og kastes etter bruk;
- Ikke bruk produktet etter utløpsdatoen som er angitt på emballasjen;
- Ikke bruk produktet hvis pakningen er skadet;
- Ikke utsett produktet for varme, sollys, fuktighet og oppbevar utilgjengelig for barn;
- Må ikke spises;
- Pass på at tuppen på beholderen ikke kommer i kontakt med øyet;
- Oppbevar produktet under 25 °C. Må ikke fryses;

Sammensetning:

Krysslinket natriumhyaluronat 0,4 %, dinatriumtetaboratdehydrat, borsyre, natriumklóríð, vann til injeksjonsvæske.

Pakningsstørrelser: 10 ml flaske (PFMD), 0,35 ml x 15 endosser, 0,35 ml x 5 endosser (prøvepakning)

Før ytterligere informasjon kontakt lege eller ditt lokale Santen-kontor på www.santen.eu



OFFHEALTH S.p.A.,
Via Giovanni Paisiello 10,
50144 Florence, Italia

Produksjons-dato	Produsent	Lagres under 25 °C	Unngå direkte sollys	Sterilisert ved bruk av aseptiske prosesseringsteknikker	Partikode	Brukes for	Se bruks-anvisningen	Kun til engangs-bruk	Skal ikke brukes hvis emballasjen er skadet	Oppbevares tørt



10

8

6

Part No: 4134-01

Leaflet Ocutears Hydro+

Item No: 017490, 017498

0x360 mm | Country: DK, IS, NO | Colors:

1. The following table summarizes the results of the study.

7-16 pt Component code

10.1002/anie.201907002

Black

1

Tech

1

USE, CHECK THE SPOT COLOR!